

NEW



倍数性・ゲノムサイズ解析用試薬 CyStainシリーズ CyStain UV/PI OxProtect

二次代謝産物による酸化の悪影響を抑制

- ◆ バラツキの少ないDNAヒストグラム (低CV%値)
- ◆ 安定したピーク位置の再現性

測定結果の比較 (例:イチゴの葉)


NEW

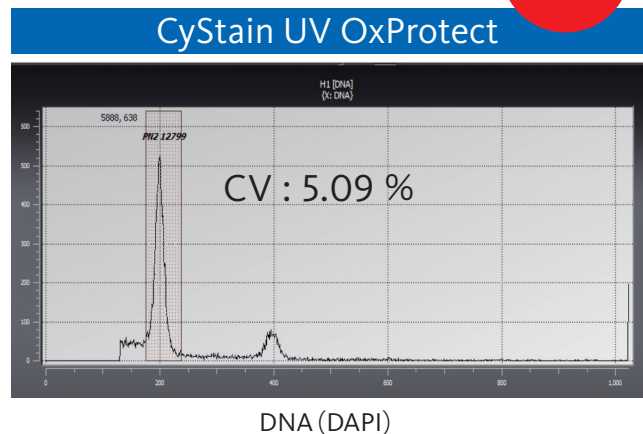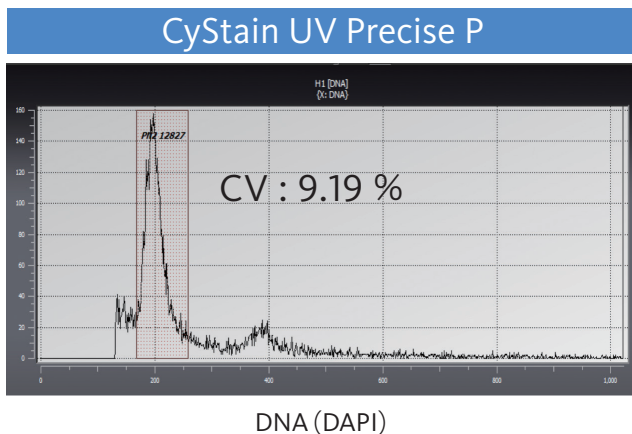

倍数性・ゲノムサイズ解析用フローサイトメーターCyFlow Ploidy Analyserで解析した結果、CyStain UV OxProtectは、バラツキの少ないピーク(低CV%値)を得ることが出来ました。

有効事例

イチゴ、ユーカリ、バナナ、イネ、トウモロコシ、テンサイ、ニンニクガラシ、クマニンニク、セイヨウサンザシ、スイバ、タイム、セイヨウキツタ、ポトス、ランタナ、ラベンダー、ローズマリー、サルビア、オシダ

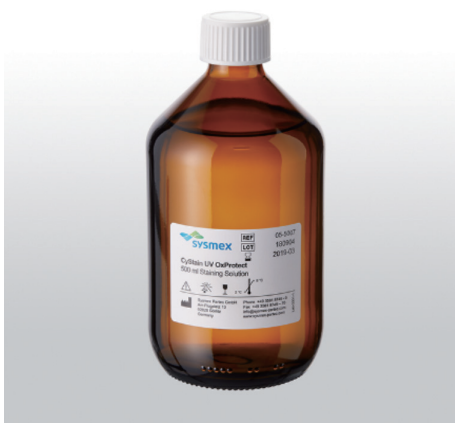

CyStain UV OxProtect



CyStain PI OxProtect

■ CyStain OxProtect 製品情報 ■

品番	製品名	包装単位	製品説明	希望小売価格(円)
BF518636	05-5007 CyStain UV OxProtect	250 tests	DAPI染色による植物細胞核染色用1ステップ試薬 500 ml Staining Solution	35,500
BG488498	05-5027 CyStain PI OxProtect	250 tests	PI染色による植物細胞核染色用1ステップ試薬 500 ml Staining Buffer 2 x 1.5 ml Propidium Iodide 1 x 5 mg RNase A	85,500


■ CyStainシリーズ 製品情報 ■

品番	製品名	包装単位	製品説明	希望小売価格(円)
AF009546	05-5002 CyStain UV Precise P	250 tests	DAPI染色による植物細胞核染色用2ステップ試薬(強酸性) 125 ml Nuclei Extraction Buffer 500 ml Staining Buffer	35,000
CK250398	05-5003 CyStain UV Precise T	250 tests	DAPI染色による核染色用2ステップ試薬(弱酸性) 125 ml Nuclei Extraction Buffer 5 x 0.525 g Buffer Reagent 500 ml Staining Buffer	35,000
BH251553	05-5022 CyStain PI Absolute P	250 tests	PI染色による植物細胞核染色用2ステップ試薬(強酸性) 125 ml Nuclei Extraction Buffer 500 ml Staining Buffer 2 x 1.5 ml Propidium Iodide 1 x 5 mg RNase A	85,000
AN695184	05-5023 CyStain PI Absolute T	250 tests	PI染色による核染色用2ステップ試薬(弱酸性) 125 ml Nuclei Extraction Buffer 5 x 0.525 g Buffer Reagent 500 ml Staining Buffer 2 x 1.5 ml Propidium Iodide 1 x 5 mg RNase A	85,000

CyFlow Ploidy Analyser 倍数性・異数性/ゲノムサイズ解析用フローサイトメーター

植物・動物細胞、微生物の倍数性解析やDNA・ゲノムサイズ解析に適したフローサイトメーターです。波長365 nmのUV-LEDはDAPIを効率よく励起し、倍数性解析が精度よく行えます。波長532 nmのグリーンレーザーはPIによるゲノムサイズ定量で、488 nmレーザー励起よりも優れた結果が得られます。

- ・寸法: 幅 381 mm x 奥行 280 mm x 高さ 279.5 mm
コンピュータビルトイン(ディスプレイ開時 高さ 528 mm)
- ・重量: 11.5 kg

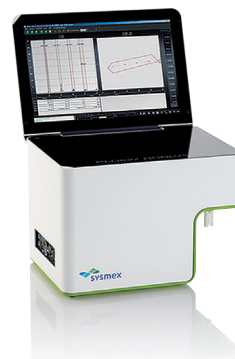

■ CyFlow Ploidy Analyser 製品情報 ■

品番	製品名	製品説明	希望小売価格(円)
CC994237	CY-S-3039_V1 CYFLOW PLOIDY	UV-LED - 365nm, 1パラメーター	3,000,000
AN834999	CY-S-3039_V2 CYFLOW PLOIDY	532nm 30mW green laser, 2パラメーター	3,900,000
BG111836	CY-S-3039_V3 CYFLOW PLOIDY	UV-LED - 365nm, 532nm 30mW green laser, 2パラメーター	4,500,000
CC270652	CY-S-3080-6 CUBE 6 AUTOLOADER	Cube 6用オートローダー	2,430,000
別売品			
CJ100861	06-500-1040 KEYBOARD	PC用キーボード	7,000
BV637599	06-500-1041 MOUSE	PC用マウス	5,000

- ※ 希望小売価格は消費税別です。
- ※ 本カタログ内の全製品(項目)は研究用であり、診断に用いることはできません。
- ※ 本内容は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

シスメックス株式会社

日本・東アジア地域本部 R&I事業推進部

ソリューションセンター 神戸市西区室谷1-3-2 〒651-2241 Tel 078-991-2091 Fax 078-997-9976
東京支社 東京都品川区大崎1-2-2 〒141-0032 Tel 03-5434-8556 Fax 03-5434-8557

[sysmex-fcm.jp](http://www.sysmex-fcm.jp)



注: 活動及びサイトの適用範囲は規格により異なります。
詳細は www.tuv.com の ID 0910589004 を参照。
Note: Scope of sites and activities vary depending on the standard.
For details, refer to the ID 0910589004 at www.tuv.com



*外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。

G1908003 |